

Genesis®

Пластический интракавернозный фаллопротез.

Надёжность, проверенная временем: абсолютная целостность после 8000 циклов сгибания под углом 90°

Высокая степень ригидности дистальной части протеза: обеспечивает эстетическую и анатомическую схожесть

Сплав титана и серебра в виде двойной спирали: обеспечивает память формы, исключает возможность произвольного распрямления



Интраоперационное укорочение длины протеза соответственно анатомическим особенностям пациента



Атрауматичные колпачки легко соединяются (не требуют специального хирургического инструментария)

Инструментарий



Titan® Touch

Цилиндры с помпой

Длина, (см)	14	16	18	20	22
-------------	----	----	----	----	----

Резервуары

Ёмкость, (мл)	75	125
Cloverleaf «лист клевера»		

Сборочный комплект



Состав сборочного комплекта:

- 4 комплекта соединений True-Lock® plug;
- 4 пары накручивающихся удлиняющих колпачков (1 см; 1,5 см; 2 см; 3 см);
- иглы Кейта колющего типа (под каждый цилиндр);
- устройство защиты цилиндров при ушивании корпоротомии (защитная лопатка);
- атрауматичные иглы из пластика для промывки системы трубочек;
- переходники с замком Luer Lock для подготовки устройства;
- защитные кембрики на зажимы типа «москит».

Genesis®

Диаметр	9,5 мм	11 мм	13 мм
Длина	14 – 23 см	16 – 25 см	18 – 27 см

Набор состоит: пара цилиндров, 3 пары колпачков

ООО «Уромед М»

117342, г. Москва, ул. Введенского дом 1, стр.1

Тел: +7 (495) 783-68-11
www.uromed-m.ru

Руководитель направления Coloplast
Кордонский Александр Анатольевич

Тел. +7 (965) 364-28-67
E-mail: titan@uromed-m.ru

ПЕНИЛЬНЫЕ ИМПЛАНТЫ

Современный метод лечения эректильной дисфункции
Titan® Touch и Genesis®



Все компоненты протеза обладают гидрофильным покрытием

Titan® Touch

3-х компонентный наполняемый фаллопротез с помпой «одно касание» нового поколения.



Bioflex® цилиндры: обеспечивает стойкую ригидную и естественную эрекцию

Кончики цилиндров: имеют анатомическую форму, что придаёт естественный вид

21+ мм Titan®

Помпа «Одно касание»: легкая и быстрая дефляция цилиндров одной рукой, даже у пациентов с ограниченными возможностями

Блокирующий клапан резервуара – Lock-out™: предотвращает аутоинфляцию при повышенном давлении на резервуар

True-Lock® соединение: легкая и быстрая сборка без дополнительного инструментария и без риска утечки

Узкое основание цилиндров и нулевой угол крепления трубочек: придаёт удобство для имплантации

Помпа с ребристой поверхностью: облегчает нахождение и активацию для пациента

Эволюция во времени фаллопротеза Titan® Инновационный дизайн. Высокое качество.




Titan Touch Pump
помпа нового поколения.




Zero Degree Angle
угол отхождения трубочек 0° позволяет использовать имплант большего размера с меньшим количеством колпачков-экстендеров.



Мягкие моделирующие апексы цилиндров анатомической формы.

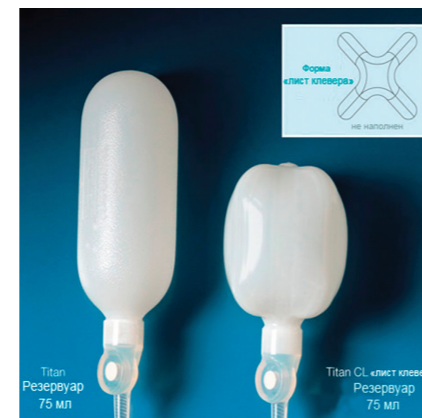

Резервуар CL «лист клевера»
совершенная геометрическая форма позволяет сделать более комфортным процесс имплантации резервуара. Большой объем при меньших размерах.

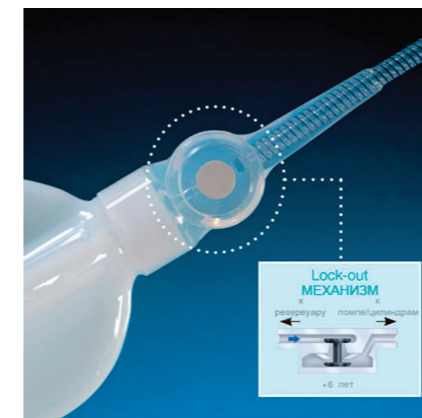

Lock-out™ valve
блокирующий клапан резервуара, исключающий аутоинфляцию при повышении давления как из вне, так и внутри резервуара.



True-Lock®
соединение: легкая и быстрая сборка без дополнительного инструментария и без риска утечки.

Гидрофильное покрытие

Возможность выбора антибактериального раствора.

Все составные части фаллопротезов Titan® Touch и Genesis® обладают гидрофильным покрытием

Что даёт гидрофильность:

- Значительно повышает адсорбцию водных растворов антибактериальных средств на поверхности частей протеза
- Доказано «in vitro» снижение бактериальной адгезии к поверхности импланта
- При намокании придаёт абсолютную гладкость компонентам протезов, тем самым облегчая имплантацию
- Делает возможным использование и комбинирование любых антибактериальных средств

Преимущества фаллопротезов с гидрофильным покрытием:

1. Значительно снижен риск инфицирования
2. Облегчен процесс имплантации
3. Даёт оперирующему хирургу возможность выбора антибактериального препарата

Titan® Touch

во время погружения импланта происходит связывание растворенных веществ с гидрофильным покрытием.



Протез погружается в раствор йодсодержащего вещества.

Экспозиция 1 мин.



Через минуту поверхность протеза полностью окрашена.

Подобный эффект происходит с растворами антибактериальных средств, выбранными оперирующим хирургом.

Genesis®



Все компоненты протеза обладают гидрофильным покрытием

Пожизненная гарантия на механическую поломку распространяется на все компоненты пенильных имплантов Coloplast

1 - Data on file.
2 - Rajpurkar A, Fairfax M, Li H, Dhabuwala CB. Antibiotic soaked hydrophilic coated bioflex: a new strategy in the prevention of penile prosthesis infection. J Sex Med. 2004 Sep;1(2):215-20.
3 - Hellstrom WJ, Hyun JS, Human L, Sanabria JA, Bivalacqua TJ, Leungwattanakij S. Antimicrobial activity of antibiotic-soaked, Resist-coated Bioflex. Int J Impot Res. 2003 January;15(1):18-21.
* Étude réalisée sur le Staphylocoque epidermidis.
** Étude réalisée avec gentamycine + bacitracine sur le Staphylocoque epidermidis.
Study done on Staphylococcus epidermidia
Study done with gentamycin + bacitracin on Staphylococcus epidermidia